

Clearblue® PLUS

Тест на беременность "Клиаблу плюс" (Clearblue Plus)

- Clearblue® PLUS показывает точность свыше 99 % со дня ожидаемого начала менструации.
- Clearblue® PLUS можно использовать за 5 дней до дня задержки менструации.

Внимательно прочтите данный листок-вкладыш перед проведением теста.

Перед проведением теста

Для проведения теста вам могут понадобиться часы.

1 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТА

Со дня ожидаемого начала менструации тест на беременность можно проводить в любое время дня. Если тестирование проводится раньше ожидаемого начала менструации, используйте первую утреннюю мочу этого дня.

Когда вы будете готовы к проведению тестирования, извлеките тест из обертки из фольги и снимите синий колпачок. Сразу же используйте тест.

ТЕСТИРОВАНИЕ В МОЧЕ

Проводить тест можно непосредственно под струей мочи **либо** в пробе мочи, собранной в чистую, сухую емкость.


- Удерживайте тест, направив окрашивающийся наконечник вниз, под струей мочи **или** в собранном образце мочи, как это показано на рисунке, ровно **5 секунд**.

Колпачок

Окрашивающийся наконечник



- Наконечник сразу окрасится в розовый цвет, указывая на питание мочи. **Продолжайте держать окрашивающийся наконечник под струей мочи ровно 5 секунд.**

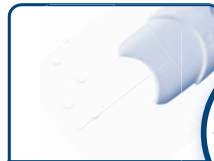

Продолжайте держать окрашивающийся наконечник под струей мочи ровно 5 секунд.



Начинайте отсчет 5 секунд, когда окрашивающийся наконечник станет розовым.

Струя мочи **ЛИБО** Собранный образец

- Держите окрашивающийся наконечник направленным вниз или положите тест в горизонтальном положении, пока не появится линия в контрольном окошке и результат.
- При желании наденьте колпачок обратно.

См. **вопрос 7**, если окрашивающийся наконечник не стал полностью розовым.

3
МИНУТЫ

ПОДОЖДИТЕ 3 МИНУТЫ. Когда тест начнет работать, вы увидите, как начнет(-ут) появляться голубая(-ые) линия(-и).

Окошко с результатом

Контрольное окошко



3 СЧИТЫВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Вы можете считать свои результаты в окошке с результатом.

Не считывайте результат до появления в контрольном окошке голубой линии. Данная линия указывает на то, что тест сработал.

Результат «Беременна» может появиться через 1 минуту, если тестирование проводится начиная с первого дня задержки (т. е. на следующий день после дня ожидаемого начала менструации).

Вам следует подождать 3 минуты, чтобы подтвердить результат «Не беременна», или в случае тестирования до дня ожидаемого начала менструации (см. **вопрос 11**).

Если голубая линия не появилась в контрольном окошке в течение **10 минут**, то тест не сработал (см. **вопрос 8**).

НЕ БЕРЕМЕННА

БЕРЕМЕННА



Если ваш результат — «Не беременна», см. **вопрос 13** в разделе «Вопросы и ответы».



Если ваш результат — «Беременна», см. **вопрос 14** в разделе «Вопросы и ответы».



Не имеет значения, если одна из линий, которые составляют знак «+», светлее или темнее другой. Результат — «Беременна».

ВАЖНО! Считайте результаты теста в течение **10 минут** после проведения теста.

Не принимайте во внимание никакие изменения результатов теста по истечении этого времени.

Если вы по-прежнему не уверены в своем результате, см. **вопрос 9** для получения подробной информации.

Вопросы и ответы — прочтите раздел на обороте, в котором даны ответы на самые часто задаваемые вопросы.

Вопросы и ответы

- 1. Насколько точным является тест Clearblue® PLUS?**
Clearblue® PLUS показывает точность свыше 99 % при использовании со дня ожидаемого начала менструации (согласно лабораторным анализам).
- 2. Каков принцип работы теста Clearblue® PLUS?**
Когда вы беременны, ваш организм вырабатывает гормон беременности ХГЧ (хорионический гонадотропный гормон человека). На ранних сроках беременности количество ХГЧ в организме увеличивается. Clearblue® PLUS может определить даже самое незначительное количество этого гормона в моче (чувствительность этого теста составляет 25 мМЕ/мл).
- 3. Когда можно проводить тестирование с помощью теста Clearblue® PLUS?**
Clearblue® PLUS можно использовать за 5 дней до задержки менструации (то есть за 4 дня до ожидаемого начала менструации). Однако, если вы проводите раннее тестирование и получаете результат «Не беременна», все еще существует вероятность, что вы беременны. В таблице ниже приведены результаты клинических испытаний теста Clearblue® PLUS на ранних сроках на беременность.

Раннее тестирование		
Количество дней до ожидаемого начала менструации	% образцов, взятых у беременных женщин, с результатом «Беременна»	
-1	98%	
-2	97%	
-3	88%	
-4	56%	

- 4. Следует ли мне использовать первую утреннюю мочу?**
Если тестирование проводится раньше ожидаемого начала менструации, мы рекомендуем использовать первую утреннюю мочу этого дня. Во всех остальных случаях вы можете проводить тестирование в любое время суток. Перед проведением теста избегайте чрезмерного употребления жидкости.
- 5. Я не знаю, когда должна начаться следующая менструация. Как узнать правильное время проведения теста?**
Чтобы рассчитать срок обычно продолжительность цикла, посчитайте количество дней с первого дня месячных до дня, после которого должна начаться следующая менструация.
 - Если у вас нерегулярные менструальные циклы, необходимо учитывать наиболее продолжительный цикл за последние месяцы.
 - Если вы не знаете, когда должна начаться менструация, рекомендуем проводить тестирование не ранее, чем через 19 дней после последнего незащищенного полового акта.
 - Если результат теста «Не беременна», но вы считаете, что можете быть беременны, см. [вопрос 13](#).
- 6. Могут ли какие-либо лекарственные препараты или состояние здоровья повлиять на результат?**
 - Перед проведением теста всегда читайте инструкции производителей всех принимаемых вами лекарств.
 - Препараты для лечения бесплодия, содержащие гормон ХГЧ, могут стать причиной ошибочных результатов (такие препараты для лечения бесплодия вводятся, как правило, в виде инъекций, и тестирование в течение небольшого периода времени после инъекции может привести к ложному результату «Беременна»).
 - Другие препараты для повышения фертильности (например, кломифена цитрат), обезболивающие препараты и гормональные контрацептивы (например, противозачаточные таблетки) не должны влиять на результат.
 - Если вы недавно прекратили использовать гормональную контрацепцию или принимаете такие лекарственные средства для лечения бесплодия, как кломифена цитрат, ваш менструальный цикл может быть нерегулярным, что может привести к преждевременному выполнению теста.
 - Если вы недавно были беременны (даже если вы не выносили ребенка до полного срока), можно получить ложный результат «Беременна».
 - Внематочная беременность, кисты яичников, менопауза и некоторые очень редкие заболевания могут стать причиной ошибочных результатов.
 - Если получен результат «Беременна», впоследствии вы можете обнаружить, что не беременны, поскольку беременность может естественным способом прерваться на ранних стадиях.

В случае получения неожиданного результата следует обратиться к врачу.

- 7. Я использовала тест на беременность, но окрашивающийся наконечник не стал полностью розовым. Что мне делать?**
Если окрашивающийся наконечник не стал полностью розовым, то, вероятно, вы использовали недостаточное количество мочи. Тем не менее, если в течение 10 минут после проведения теста в контрольном окошке появилась голубая линия, то тест сработал. Если голубая линия не появилась в контрольном окошке в течение 10 минут после проведения теста, см. [вопрос 8](#).
- 8. Я использовала тест на беременность, но в контрольном окошке не появилась голубая линия. Что мне делать?**
Если голубая линия не появилась в контрольном окошке в течение 10 минут после проведения теста, то тест не сработал. К этому могут привести следующие причины:
 - Окрашивающийся наконечник не был направлен вниз, либо тест не был расположен горизонтально после попадания на него мочи.
 - Использовано недостаточное либо избыточное количество мочи.

Отбор пробы должен длиться 5 секунд.

Необходимо провести повторное тестирование, используя новый тест и внимательно следуя инструкциям. Соберите образец мочи в чистую, сухую емкость и погрузите туда только окрашивающийся наконечник на 5 секунд.
- 9. Что делать, если я не уверена в своем результате?**
 - Результат «Беременна» подтверждается наличием голубой линии в контрольном окошке и знаком «+», появившимся в окошке с результатом в течение 10 минут с момента проведения теста.
 - Знак «+» в окошке с результатом может выглядеть по-разному, однако линии, составляющие знак «+», и линия в окошке контроля должны иметь одинаковую ширину (см. рисунки А–С).

Рисунок А
Это указывает на результат «Беременна». Этот результат возможен при тестировании раньше ожидаемого начала менструации, когда уровень гормона ХГЧ может быть относительно низким.







Рисунок В
У беременных женщин такой результат не редкость при проведении тестирования непосредственно в день или примерно в день ожидаемого начала менструации, когда уровень ХГЧ остается относительно низким.

Рисунок С
У беременных женщин такой результат возможен при проведении тестирования через несколько дней после дня ожидаемого начала менструации, т. е. при более высоком уровне гормона ХГЧ.

Если вы по-прежнему не уверены в своем результате, проведите повторный тест не ранее чем через 3 дня, внимательно следуя инструкциям.

- Результат «Не беременна» подтверждается наличием голубой линии в контрольном окошке и знаком «-», появившимся в окошке с результатом в течение 10 минут с момента проведения теста. Если ваш результат — «Не беременна», но вы считаете, что можете быть беременны, см. [вопрос 13](#).

- 10. Что может повлиять на точность результата?**
При тестировании раньше дня ожидаемого начала менструации точность теста Clearblue® PLUS будет ниже. Вы можете получить недостаточный результат, если отбор пробы мочи не длился в течение указанного времени. Тем не менее, если в течение 10 минут с момента проведения теста в контрольном окошке появилась голубая линия, результат является достоверным. При постоянном получении неожиданных результатов обратитесь к врачу. Также см. [вопрос 6](#).
- 11. Когда можно смотреть результат теста?**
Результат «Беременна» может появиться всего за 1 минуту, если тестирование проводится начиная с первого дня задержки (т. е. на следующий день после дня ожидаемого начала менструации). Перед считыванием результатов убедитесь, что в контрольном окошке присутствует голубая линия. Вам следует подождать 3 минуты, чтобы подтвердить результат «Не беременна», или если вы тестируете до дня ожидаемого начала менструации. Если голубая линия не появилась в контрольном окошке в течение 10 минут, то тест не сработал (см. [вопрос 8](#)).
- 12. Как долго будет отображаться результат теста?**
Результат можно считать в течение 3–10 минут после проведения теста. Не обращайте внимания на изменение результатов, произошедшее через 10 минут.
- 13. Результат моего теста — «Не беременна». Что мне делать?**
Вы можете быть не беременны, или уровень гормона беременности еще недостаточно высок для обнаружения. Вы также могли неверно рассчитать день ожидаемого начала менструации.
 - Если было проведено раннее тестирование, следует провести повторный тест после дня ожидаемого начала менструации.
 - В случае задержки менструации проведите повторный тест через 3 дня. Если при повторном тестировании получен результат «Не беременна», но менструация по-прежнему нет, обратитесь к врачу.
- 14. Результат моего теста — «Беременна». Что мне делать?**
Если ваш результат — «Беременна», следует обратиться к врачу для консультации по поводу дальнейших действий.

 Медицинское устройство для диагностики <i>in vitro</i>	 Код партии	 Не используйте повторно
 Предельно допустимая температура: 2–30 °C	 Срок годности	 Производитель

www.clearblue.com

С вопросами об изделии обращайтесь в отдел поддержки клиентов по приведенному ниже адресу:

Производитель: ЭсПиДи Свис Пресиан Дайагностик ГмбХ, 47 Рут де Ст.-Жорж, 1213 Летит Ланси, Женева, Швейцария.
Произведено на: Алер (Шанхай) Дайагностик Ко., Лтд, Шанхай 201203, Китай.
Упаковщик: Сонокс Польша — Пекаждзин Сервисес СП. 30. О, 95-010, Стрыков, Польша.

Clearblue является товарным знаком SPD. © SPD, 2016. Все права защищены

Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «Проктер энд Гамбл Дистрибуторская Компания» РФ, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2 Телефон 8 800 333 5198

Для получения консультации по поводу дальнейших действий, информации и общих рекомендаций по вопросам беременности посетите наш сайт:

www.clearblue.com

Данное устройство предназначено для домашнего использования.

В случае хранения в холодильнике довести до комнатной температуры в течение 30 минут до начала тестирования.

Храните в местах, недоступных для детей. Только для диагностического использования *in vitro*. Утилизируйте вместе с бытовыми отходами.

Не используйте в случае повреждения оболочки из фольги. Не используйте тест с истекшим сроком годности.

